



« Les Ateliers du Georric »

Lyon, vendredi 24 mars 2023

Oticon Medical Saphyr



Boucle magnétique

Entrée auxiliaire

Silhouette, Hear-it media
Collier Artone + TvB

Roger

Boucle magnétique (*telecoil*)



- Bobine induction intégrée
- Position T ou M/T au choix du régleur
- Mettre à disposition sur un programme dédié
- Possibilité de paramétrer le gain et la sensibilité
- Activer voice track + relever le niveau IDR +/- 35dB



Silhouette, Hear-it media


Collier Artone + TvB

- Position T ou M/T au choix du régleur
- Mettre à disposition sur un programme dédié
- Possibilité de paramétrer le gain et la sensibilité
- Activer voice track + relever le niveau IDR +/- 35dB



Entrée auxiliaire

- Entrée auxiliaire intégrée
- Mettre à disposition sur un programme dédié
- Possibilité de paramétrer le gain et la sensibilité
- Câble disponible Aux → Jack 3.5 MM
- Utilisation pour micro controlatéral

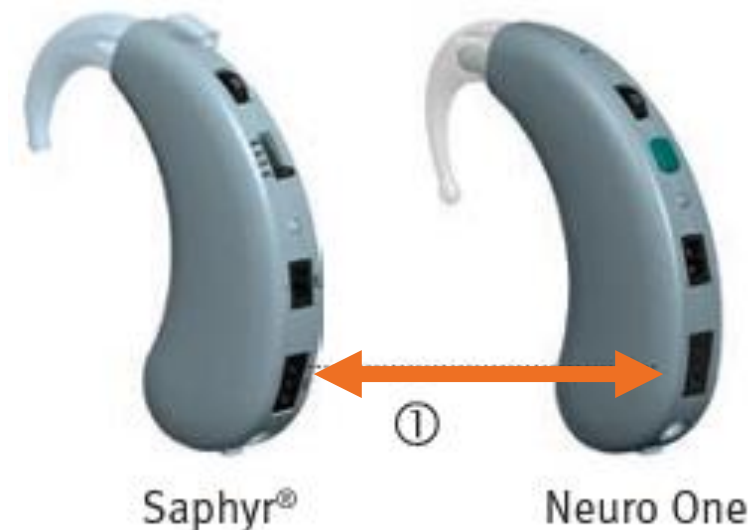

Roger X

- Branchement amovible sabot **Roger X**
- Mettre à disposition sur un programme AUX
- Possibilité de paramétrer le gain et la sensibilité
- Compatible avec tous les nv micro Phonak Roger



Oticon Medical Neuro2



Boucle magnétique

Streamer XM

Connectline app

Roger

Appareillage
bimodal

Boucle magnétique (*telecoil*)



- Bobine induction intégrée
- Position T ou M/T au choix du régleur
- Mettre à disposition sur un programme dédié
- Possibilité de paramétrer le gain et la sensibilité
- Activer voice track + relever le niveau IDR +/- 35dB



Streamer XM

- Bobine induction intégrée (bouton AUX 2 sec)
- Entrée AUXiliaire disponible (Roger X)
- Entrée Jack 3.5MM disponible
- Connexion Bluetooth +++
- Connectline TV/TEL
- Gestion volume



non utilisable si implant DIGISONIC contro

ConnectLine app


- Gestion de la source audio (M/MT/T/BT/Aux)
- Gestion du volume et des programmes
- Se connecte via le Streamer XM



non utilisable si implant DIGISONIC contro


Appareillage bimodal

- Compatibilité avec Oticon Dynamo SP & Sensei SP
- Gestion du volume et des programmes simultanée
- Protocole d'adaptation bimodale
- Se connecte via le Streamer XM

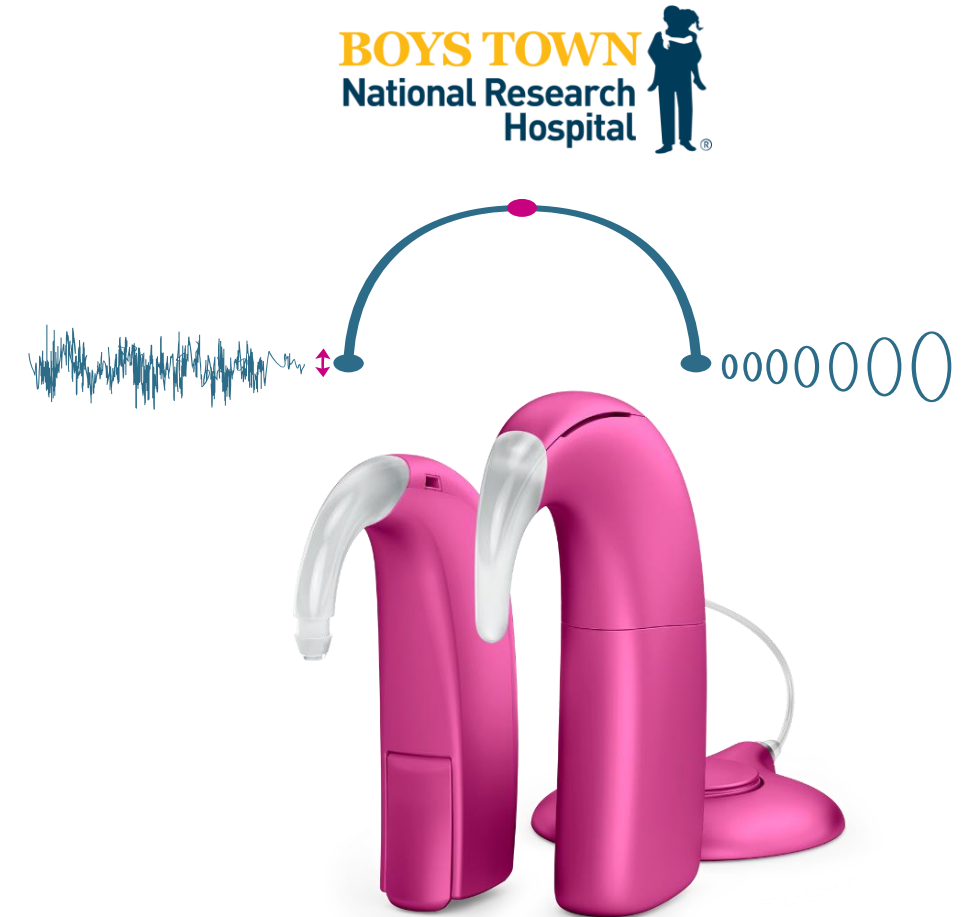

Appareillage bimodal

Protocole d'appareillage bimodal développé par les équipes de Carisa Reyes, Boys Town National Research Hospital, Nebraska (USA)

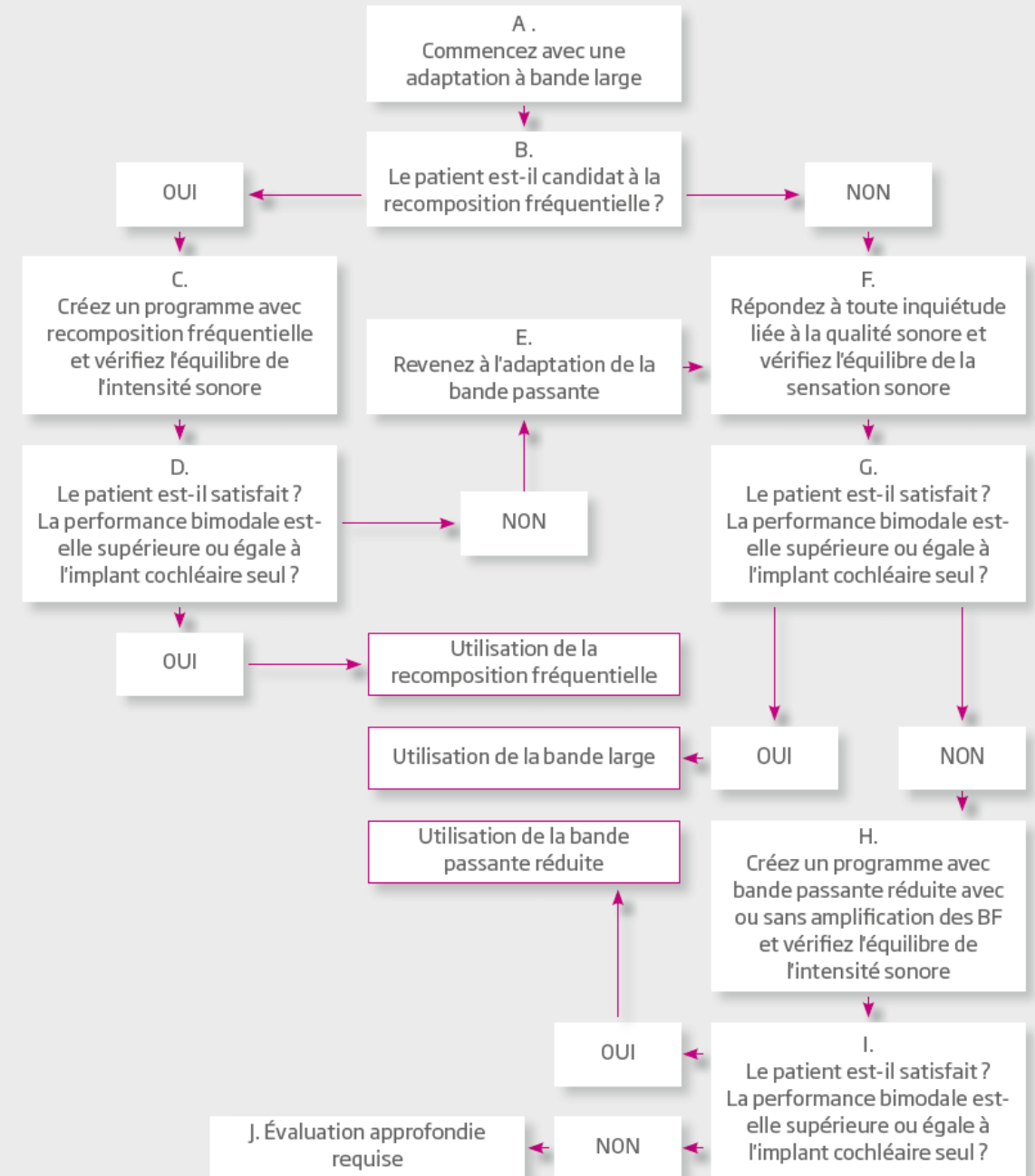

Roger X

- Branchement amovible sabot **Roger X**
- Mettre à disposition sur un programme AUX
- Possibilité de paramétrer le gain via ConnectLine app
- Compatible avec tous les nv micro Phonak Roger



MED 9 EL

« Les Ateliers du Georric »

Lyon, vendredi 24 mars 2023

Boucle magnétique

AudioKey 2

Entrée auxiliaire

Collier Artone + TvB

AudioStream

Roger 21


AudioLink



Sonnet 2



Rondo 2

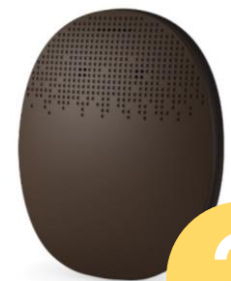


Rondo 3

Boucle magnétique (telecoil)



- Bobine induction intégrée
- Position T ou M/T au choix de l'utilisateur
- Accessible uniquement via FineTuner / Echo

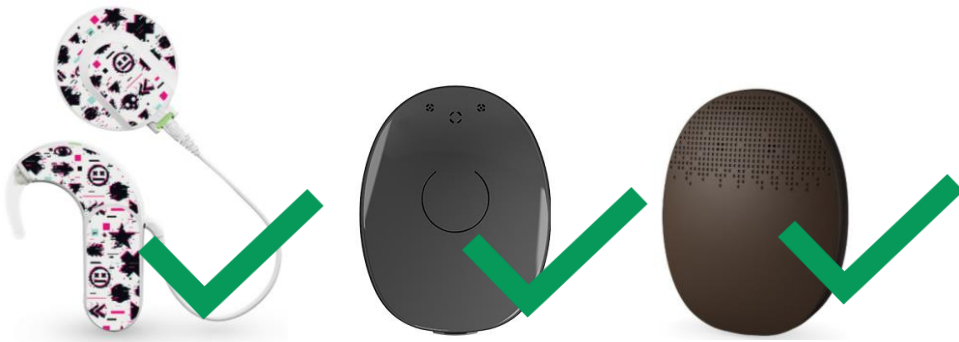

Sonnet 2

Rondo 2

Rondo 3



Entrée auxiliaire

- Entrée auxiliaire dans un couvercle FM dédié
- Câble disponible Aux → Jack 3.5 MM



Sonnet 2



Rondo 2



Rondo 3



Collier Artone + TvB

- Position T ou M/T au choix de l'utilisateur
- Utilisation téléphone mains libres
- Connexion Bluetooth +++



Sonnet 2



Rondo 2



Rondo 3



Roger 21

- Connexion automatique à l'allumage du micro
- Couvercle Roger21, vendu par l'audioprothésiste
- Compatible avec tous les nv micro Phonak Roger



Sonnet 2



Rondo 2




Rondo 3



AudioKey 2 app


- Gestion du volume, de la sensibilité et des programmes
- Renseigne sur l'état des batteries et du datalogging
- Se connecte via AudioLink sur Sonnet 1
- Se connecte en direct sur Sonnet 2
- Localisation en cas de perte

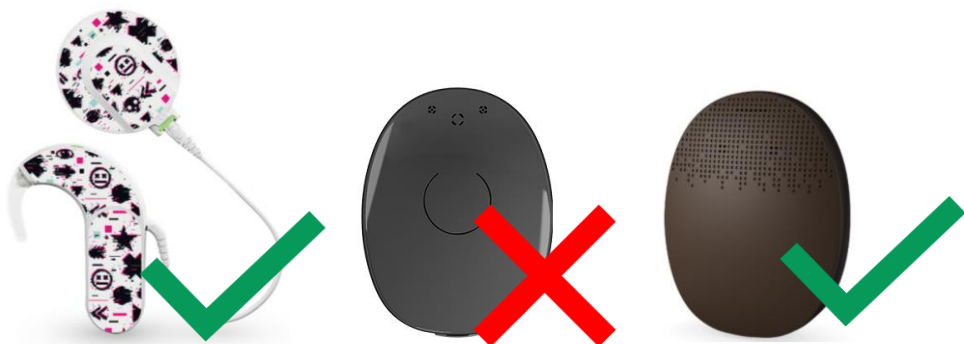

Sonnet 2

Rondo 2

Rondo 3

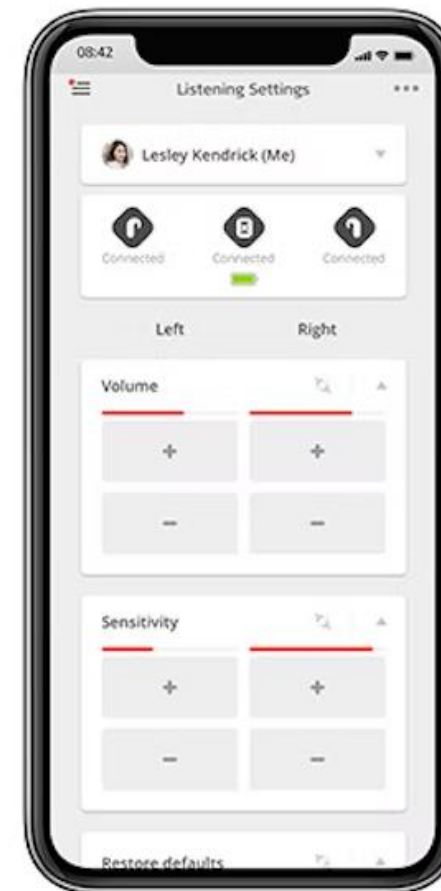

AudioLink

- Connexion Bluetooth +++
- Entrée Jack 2.5MM disponible
- Gestion des appels téléphoniques
- Gestion du streaming audio
- Utilisation comme micro déporté
- Utilisation comme émetteur TV
- Gestion volume



Sonnet 2



Rondo 2



Rondo 3

AudioStream

- Connexion Bluetooth +++
- Appairage via AudioLink 2 app
- Utilisation streaming signal audio
- Utilisation téléphone (micro du téléphone)



Sonnet 2



Rondo 2



Rondo 3

